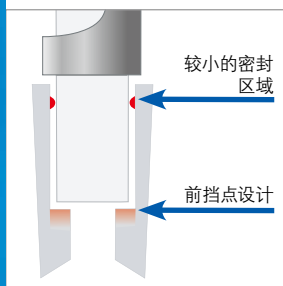


## Pipet-Lite PL单道移液器

完美的移液享受

**LTS轻触去吸头系统**

Rainin获得专利的LiteTouch轻触式去吸头系统(LTS)符合人体工程学且易于使用。较小密封区域和前挡点设计能够确保快速安装吸头、密封性良好且易于退出。为您的双手带来非凡感受。无需敲击吸头！（适用于L系列）

**最佳的移液操控性**

轻质弹簧设计，极大减少活塞推进力；全新的低摩擦密封系统可实现非常平稳的移液操作；指钩设计减少手握持力；从而大大减少了手部疲劳、酸痛和损伤的风险。

**精准，耐用**

高品质零件保证了Pipet-Lite PL移液器的出色性能，加上系统的GPP培训确保了精准的移液效果；过硬的产品质量及可靠的专业服务使产品更为耐用。

**量程锁定、减震功能**

移液器锁定装置可将量程锁定，防止体积被意外更改，吸头推出器内有硅树脂减震器，可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力。

**全新升级，超值体验**

秉承Pipet-Lite的经典设计以及完美的测试精度，新一代的Pipet-Lite PL以崭新的面貌隆重登场。LTS型号的推出丰富了Pipet-Lite PL系列产品，以超高的性价比使您体验到Rainin专利技术带来的舒适、精准的移液享受。

# 瑞宁Rainin Pipet-Lite PL单道移液器

## 技术参数

型号	量程 ( $\mu\text{L}$ )	步进量 ( $\mu\text{L}$ )	准确性		重复性	
			%	$\mu\text{L}$ ( $\pm$ )	%	$\mu\text{L}$ ( $\leq$ )
L-2PL, SL-2PL	0.2	0.002	12.0	0.024	6.0	0.012
	1		2.7	0.027	1.3	0.013
	2		1.5	0.030	0.7	0.014
L-10PL, SL-10PL	1.0	0.02	2.5	0.025	1.2	0.012
	5.0		1.5	0.075	0.6	0.03
	10.0		1.0	0.1	0.4	0.04
L-20PL, SL-20PL	2	0.02	7.5	0.15	2.0	0.04
	10		1.5	0.15	0.5	0.05
	20		1.0	0.2	0.3	0.06
L-100PL, SL-100PL	10	0.2	3.5	0.35	1.0	0.1
	50		0.8	0.4	0.24	0.12
	100		0.8	0.8	0.15	0.15
L-200PL, SL-200PL	20	0.2	2.5	0.5	1.0	0.2
	100		0.8	0.8	0.25	0.25
	200		0.8	1.6	0.15	0.3
L-1000PL, SL-1000PL	100	2	3.0	3.0	0.6	0.6
	500		0.8	4.0	0.2	1.0
	1000		0.8	8.0	0.15	1.5
*L-5000PL, *SL-5000PL	500	5	2.4	12.0	0.6	3.0
	2500		0.6	15.0	0.2	5.0
	5000		0.6	30.0	0.16	8.0
*L-10mLPL, *SL-10mLPL	1 mL	20	5.0	50.0	0.6	6.0
	5 mL		1.0	50.0	0.2	10.0
	10 mL		0.6	60.0	0.16	16.0

## 订购信息

型号 LTS	订货编号 LTS	型号 圆锥型	订货编号 圆锥型	量程范围
L-2PL	30231209	SL-2PL	30231201	0.1–2 $\mu\text{L}$
L-10PL	30231210	SL-10PL	30231202	0.5–10 $\mu\text{L}$
L-20PL	30231211	SL-20PL	30231203	2–20 $\mu\text{L}$
L-100PL	30231212	SL-100PL	30231204	10–100 $\mu\text{L}$
L-200PL	30231213	SL-200PL	30231205	20–200 $\mu\text{L}$
L-1000PL	30231214	SL-1000PL	30231206	100–1000 $\mu\text{L}$
*L-5000PL	30231215	*SL-5000PL	30231207	500–5000 $\mu\text{L}$
*L-10mLPL	30231216	*SL-10mLPL	30231208	1000 $\mu\text{L}$ –10 mL

\*5000  $\mu\text{L}$ 、10 mL型号的外形与图片不同。

## 吸头

型号	订货编号	描述	最大量程
RC-L1000/10-C	30180887	1000个/袋, 10袋	1000 $\mu\text{L}$
RC-L250/10-C	30180888	1000个/袋, 10袋	250 $\mu\text{L}$
RC-L10/10-C	30180889	1000个/袋, 10袋	10 $\mu\text{L}$
RC-1000/10-C	30767230	500个/袋, 10袋	1000 $\mu\text{L}$
RC-250/40-C	30767231	500个/袋, 40袋	250 $\mu\text{L}$
RC-10/40-C	30767232	500个/袋, 40袋	10 $\mu\text{L}$

Rainin、Pipet-Lite、XLS、XLS+、LTS、Pipetting 360°、LiteTouch和Magnetic Assist是Rainin Instrument, LLC的商标, Direct Pipette-Scan和LabX是METTLER TOLEDO Corporation的商标。



### 移液器挂钩(HU-M3、HU-S3)

可提供两种系列: 磁铁型挂钩(HU-M3)用来固定在铁质表面上, 如通风橱; 粘贴型挂钩(HU-S3)背面的3个强力胶粘贴用来固定非铁质表面上。每套有3个挂钩, 适用于所有Pipet-Lite PL、Pipet-Lite XLS+系列移液器。



### 旋转型支架(CR-7)

适用于Pipet-Lite PL、Pipet-Lite XLS+, EDP4, 可同时放7支移液器, 座架坚实稳固, 旋转取用, 十分方便。



### 移液器吸头

Rainin设有100,000级超洁净移液器吸头生产车间, 从源头上保证了吸头的洁净无污染, 可提供LTS及传统圆锥型高性价比吸头, 独有的RAININ FinePoint薄壁吸头设计, 确保了移液器操作中移液量的高准确性和高精确性。



### 梅特勒-托利多

#### 实验室/过程分析/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号  
邮编: 200233  
电话: 021-64850435  
传真: 021-64853351  
E-mail: ad@mt.com

#### 工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号  
邮编: 213125  
电话: 0519-86642040  
传真: 0519-86641991  
E-mail: ad@mt.com

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

访问网站, 获得更多信息

欢迎添加实验室微信号



微信号: MT-LAB



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。  
12360042 Printed in P.R. China 2015/01