



智能移液器支架

检查校准状态

查看保养数据

提高移液器合规性

功能强大, 使用方便
简化移液器管理

简化移液器管理


SmartStand 适配您的工作流程

Rainin SmartStand 是一种智能并且使用方便的移液器资产管理系统，可满足忙碌实验室与实验室管理人员的下列要求：

- 减少因未及时保养/超差产生的成本
- 主动管理合规性
- 减少记录与报告所需时间

SmartStand 通过读取位于每个 Rainin XLS 和 XLS+ 移液器内的 RFID 芯片，可快速显示多达四支手动或电动移液器的合规状态。拿起移液器后，SmartStand 的彩色液晶显示屏将切换至显示该移液器保养与校准状态的详细视图。

SmartStand 可独立运行，也可与 EasyDirect™ 移液器资产管理软件集成，从而形成一种供整个实验室使用的移液器资产管理与跟踪系统。EasyDirect 允许用户记录移液器的使用情况、对需要保养的移液器做标记，以及在其他实验室管理系统 (LIMS) 之间传送数据，并将独一无二的信息（例如：所有者、快速检查方法与库存编号）记录到每支移液器的 RFID 芯片上，从而简化实验室资产管理工作。

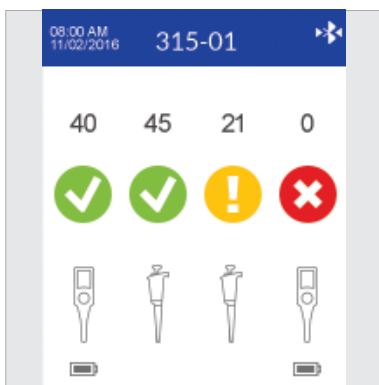

减少成本

不会因为移液器超差或未按时保养而猝不及防。SmartStand 可将数据清晰直观地显示出来。



管理合规性

利用可高度定制的自动化系统进行跟踪，从而主动管理移液器保养、校准与定期性能检查工作。



节省时间

SmartStand 可简化和快速执行移液器管理工作。它不仅显示存储在每一支 Rainin XLS/XLS+ 移液器上的保养数据，还可与 EasyDirect 集成，从而形成更加全面的资产跟踪与报告系统。



SmartStand 与挂钩实现一体化！

SmartStand 与配套提供的加固套装相结合，从而变成一种“智能型挂钩”。

快速 RFID 阅读器可同
时扫描四支移液器

读取方便的彩色屏幕
显示移液器状态

可同时对多达四支
E4 移液器充电

可分离式支架
顶端允许安
装在墙壁或搁
板上

内置蓝牙与
USB 迷你端口



SmartStand 与 EasyDirect™

功能强大的资产管理工具

SmartStand

- 灵活且可扩展
- 适用于手动与电动 XLS/XLS+ 移液器
- 用户可定义保养/校准时间间隔
- QuickCheck 功能提示进行定期性能验证
- 直观的图形界面
- 110/220V, 50-60 Hz
- 通过蓝牙* 或 USB 连接
- 可单独使用, 也可使用可选套装将支架顶端安装至搁板或墙壁

EasyDirect 移液器资产管理

- 可将多个 SmartStand 与电脑连接
- 可跟踪与管理所有品牌/型号移液器
- 可读写至 Rainin XLS/XLS+ 移液器的 RFID 芯片上
- 可导出至 Excel、csv 或 xml (附加、覆盖或删除)
- 自动导出服务计划确保自主操作
- 自动安排服务请求
- 系统要求:

Windows 7 (SP1) 或更高版本, 5GB 可用内存以及 4 GB RAM

订货号	描述
30312897	智能充电架 SCS-B
30312898	智能充电架 SCS
30312899	磁性加固套装 SCS-FK-M
30313000	搁板专用加固套装 SCS-FK-S
30313247	支架专用加固套装 SCS-FK-B
17012879	电动移液器电源 E4-RCSWPS
30086494	ADP-BT-S 蓝牙 RS232 软件保护器

* 对于 SCS, 使用蓝牙软件保护器 ADP-BT-S (订购号: 30086494)

www.mt.com/rainin

更多信息

Mettler-Toledo Rainin, LLC

7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621

电话 +1 510 564 1600

传真 +1 510 564 1604

如有技术变更, 恕不另行通知

© 10/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC

根据需在线打印相关内容 PB-269 修订版本 A (A4)