

瓶頂分注器

安心進行液體分注 快速簡單並且具精確性



卓越的化學相容性

Rainin Disp-X 使用高級惰性材料可確保您的試劑於所有等分樣本中的純度。Disp-X 相容於多種的液體，並且可對生物應用進行高壓滅菌。



內建的安全功能

Disp-X 分注器包含安全系統，具有出液管與封口蓋，可防止意外分配或溢出。內玻璃活塞用惰性聚丙烯套管密封，以避免活塞受損，並讓操作可以順利進行。



清楚和簡單控制

使用可調節的容量控制旋鈕，可輕易在 Disp-X 上設定容量。簡單地將標記置於希望的容量，便可順利進行設定。上下移動活塞只需輕輕施力，因為在活塞跟圓筒之間有一層具潤滑作用的液體膜。出液閥相當容易清潔與更換。



彈性的分注選項

使用 Disp-X，便能夠配合您的應用更換各種配件。更換配件快速簡便。我們提供多種尺寸の出液管與伸縮填注管，以便配合您的需求。Disp-X 瓶頂分注器，容量範圍 0.5-50 mL。



Rainin Disp-X™ 瓶頂分注器 輕鬆安全地處理試劑

Rainin Disp-X 手動式瓶頂分注器是一項極具價值的絕佳工具，能夠快速、可靠並且安全地分量試劑。內建的安全功能可保護使用者免受意外潑濺所影響，並可確保分配過程順暢不出錯。Disp-X 可用於生物、製藥、臨床、化學以及鑑識實驗室等廣泛的應用基礎，可使用多種相容液體，包含腐蝕性與可燃液體。Disp-X 能夠用於多種液體試劑，並且對多種溫度與黏度提供絕佳的密封度。Disp-X 提供 4 種不同的容量範圍：0.5 – 5 mL、1 – 10 mL、2.5 – 25 mL 以及 5 – 50 mL。

Disp-X™ 瓶頂分注器


安心進行液體分注

功能：

- 在 Disp-X 分注器中所使用的高級化學惰性物質
- Disp-X 分注器可使用 GL 45 螺絲直接鎖上試劑瓶；
可使用隨附的轉接器接上其他類型的瓶子
- 可更換的填充與出液閥，讓您能夠輕鬆快速進行維修與維護
- 伸縮填充管可卡至定位，以便輕易更換
- Disp-X 的自密封活塞可簡化維護流程



Disp-X 瓶頂分注器

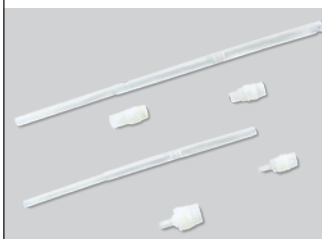

管子配件



Disp-X 元件

訂購資訊

MT-訂單編號	說明
30373527	DX-5 Disp-X 0.5-5 mL 瓶頂分注器
30373528	DX-10 Disp-X 1-10 mL 瓶頂分注器
30373529	DX-25 Disp-X 2.5-25 mL 瓶頂分注器
30373750	DX-50 Disp-X 5-50 mL 瓶頂分注器
配件	
30373751	DX-DT10 Disp-X 出液管，5 或 10 mL
30373752	DX-DT50 Disp-X 出液管，25 或 50 mL
30373753	Disp-X 填充管，5 或 10 mL，長度 125-240 mm
30373754	Disp-X 填充管，5 或 10 mL，長度 250-480 mm
30373755	Disp-X 填充管，25 或 50 mL，長度 170-330 mm
30373756	Disp-X 填充管，25 或 50 mL，長度 250-480 mm
30373757	DX-FV10 Disp-X 填充閥，5 或 10 mL
30373758	DX-FV50 Disp-X 填充閥，25 或 50 mL
30373759	DX-DV10 Disp-X 出液閥，5 或 10 mL
30373760	DX-DV50 Disp-X 出液閥，25 或 50 mL

技術規格

參數	規格
操作溫度	15-40°C (59-104°F)
蒸氣壓力	最高 600 mBar
密度	最高 2.2 g/cm ³
動黏度	最高 500 mm ² /s
準確性	≤0.5%
精確性	≤0.1%
蒸氣滅菌	測試係依照 DIN EN ISO 285 規定，在 2 bar 下以 121°C 執行

容量型號	子分類
0.5-5 mL Disp-X	0.1 mL
1-10 mL Disp-X	0.2 mL
2.5-25 mL Disp-X	0.5 mL
5-50 mL Disp-X	1 mL

RAININ 商標：Rainin、Disp-X 和 Pipetting 360° 是 Mettler-Toledo Rainin, LLC 的商標。



Mettler-Toledo Rainin, LLC
7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
電話 +1 510 564 1600
傳真 +1 510 564 1604

技術資料將不定期變更。
© 03/2017 Mettler-Toledo Rainin, LLC
為網路內容印製 17700358 Rev D

www.mt.com/rainin

瞭解更多資訊